

Sara® Flex



Sara Flex on suunniteltu helpottamaan jokapäiväisiä siirto- ja hoitotehtäviä. Sen avulla yksittäinenkin hoitaja voi auttaa potilasta istuvasta asennosta seisovaan asentoon yhdellä luonnollisella liikkeellä.

ARJO MOBILITY -GALLERIA



C

© Arjo 2019

C. Pystyy kannattelemaan omaa painoaan osittain vähintään yhdellä jalalla. Käyttää pyörätuolia pitkän matkan kulkemiseen. Lisätietoja saat Arjolta.

- **Potilastuki**
Parantaa mukavuutta ja turvallisuutta istuma-asennosta seisomaan siirtymisen aikana ja sen jälkeen.
- **Monien keskeisten siirto- ja hoitotehtävien helpottaminen**
Suunniteltu helpoksi yhden hoitajan käyttöön ilman säätöjä.
- **Luonnollinen liike eteenpäin potilaan liikkeessä**
Eteenpäin suuntautuva liike ja joustava jalkatuki mahdollistavat luonnollisen ja mukavan istuma-asennosta seisovaan asentoon siirtyvän liikkeen.
- **DSDC Dementia Design Accredited Product**
Stirlingin yliopiston Dementia Services Development Centre (DCDC) on arvioinut Sara Flexin ja myöntänyt sille luokan 1B mukaisen DSDC-akkreditointiluokituksen.



Tärkeimmät ominaisuudet

HOITOHENKILÖKUNNAN KAHVA

Kaarevan kahvan ansiosta hoitohenkilökunta voi valita, mistä pitää kiinni.

HELPPOKÄYTTÖINEN KÄSIOHJAIN JA NÄYTTÖ

Käsiohjaimessa on pitkä joustava johto, jonka avulla hoitohenkilökunta voi pysyä potilaan lähellä koko siirron ajan.

MATALA VAAKASUORA JALKALEVY

Kun potilaan jalat pidetään lähellä maata, hänen polvensa eivät ole liian korkealla, mikä helpottaa seisomaan nousemista.



VAAKA (LISÄVARUSTE)

Sisäänrakennettu elektroninen vaakaa näyttää potilaan painon käsiohjaimen näytöllä.

POTILAAN KAHVA

Kontrastivärinen, kallistettu potilaan kahva potilaan käsille, ranteille ja kyynärpäille istuma-asennosta seisomaan siirtymisen aikana.

JOUSTAVA SILIKONIJALKATUKI

Kaareva muotoilu ja pehmeä ja joustava pinta, joka tukee sääriä ja polvia istuma-asennosta seisomaan siirtymisen aikana. Säätöjä ei tarvita. Suuri pinta sopii useille potilaille ja on samalla erittäin mukava.

JOUSTAVA SILIKONIJALKAKAHIHNA

Sijaitsee matalalla ja tarjoaa useita säätövaihtoehtoja, jotta potilas voidaan asettaa turvallisesti istuma-asennosta seisomaan.

TUOTETIEDOT

Suurin enimmäiskuormitus	200 kg
Nostimen paino (sis. akun)	53,6 kg
Vähimmäissäilytyskorkeus yhteensä	1 162 mm
Vähimmäisnostokorkeus	991 mm
Enimmäisnostokorkeus	1 518 mm
Ulkoleveys jalakset kiinni	660 mm
Ulkoleveys jalakset kokonaan auki	1 029 mm
Sisäleveys jalakset kiinni	530 mm
Sisäleveys jalakset kokonaan auki	899 mm
Vapaa tila jaloille (lattiasta jalasten päälle)	108 mm
Vapaa tila rungon alla (lattiasta rungon pohjaan)	23 mm
Nostimen kokonaispituus	996 mm
Kääntösäde	1 208 mm
Nostimen suojausluokka	IP24
Käsiohjaimen suojausluokka	IPX7
Akku	24 V 4 Ah

Akun varauksen ilmainen

Huoltomittari – näyttää kokonaiskäyttöajan (tunteina)

Hätäpysäytys ja järjestelmähäiriön ohitus

Automaattinen turvapysäytys laskettaessa esteen päälle

Matalakittaiset pyörät, kahdessa takapyörässä jarrut


LISÄVARUSTEET

Saatavana laaja valikoima nostoliinoja ja Flites-nostoliinoja (kertakäyttöisiä)

Lisävaruste: integroitu vaakaa

Arjon desinfointiaineet

TILAVAATIMUKSET

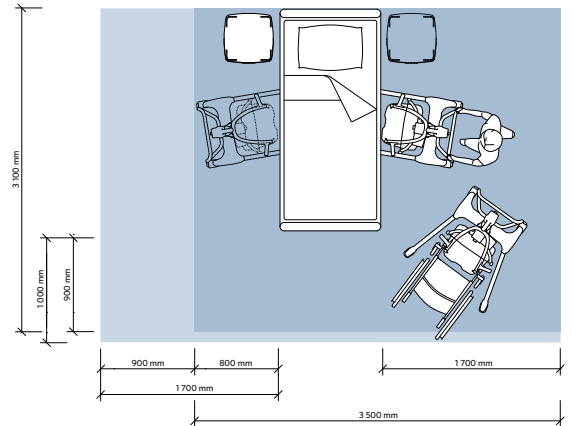

● Sininen alue osoittaa hoitohenkilökunnan tarvitseman vähimmäistyöskentelyalueen, joka tarvitaan mekaanisten apuvälineiden ergonomiseen käyttöön yhdeltä puolelta.

● Vaaleansininen alue osoittaa tarvittavan työskentelyalueen laajennuksen, joka helpottaa toimimista kummaltakin puolelta ja takaa riittävän tilan potilaalle, mekaaniselle tuelle ja hoitohenkilökunnalle.

Stirlingin yliopiston Dementia Services Development Centre (DSDC) on arvioinut tämän tuotteen ja sen rakenteen suhteessa dementiaa sairastaville potilaille tarkoitettujen tuotteiden suunnitteluperiaatteisiin ja käytettävyyteen dementia-potilaille. Tunnistamisen helpottamiseksi tuotteen soveltuvuus on luokiteltu numerolla ja sitä vastaavalla selitteellä. DSDC Accredited Product -logo myönnetään yksittäiselle tuotteelle. Tämä akkreditointi ei koske tuotteen valmistusta tai lopullista käyttöä. Vaikka parhaalla mahdollisella tavalla

onkin pyritty varmistamaan, että luokittelu vastaa tuotteen sopivuutta ja käyttötarkoitusta tämän esitteen painohetkellä, DSDC ei vastaa lopullisen tuotteen käytöstä, sen suorituskyvystä tai sen sopivuudesta käytettäväksi muiden tuotteiden tai kokoonpanojen kanssa. Jotta ympäristöä voidaan pitää dementia-potilaille sopivana tai dementia-ystävällisenä, myös muiden tuotteiden tekniset tiedot, niiden suorituskäytiedot (esim. valonheijastavuus (LRV-arvo), liukastumisen esto ja kuviointi) ja niiden sopivuus käyttötarkoitukseen on tarkoin huomioitava.

Marraskuu 2019. Arjo-laitteissa ja -tuotteissa saa käyttää vain Arjon tähän käyttötarkoitukseen suunnittelema osia. Koska kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, pidätämme oikeuden suunnittelumuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. ® ja ™ ovat Arjo-yrityksryhmän omistamia tavaramerkkejä.

Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500

Jakelija Suomessa:

Element Oy • Hakkuritie 26 C 12 • 90800 Oulu • 040 515 4902

Arjo.A00171.2.0.FI.FI

arjo